



**NL
100**

User Guide



Important Safety Instructions.....	4
Set up	6
Using the NL100	7
Maintenance and Warranty	8

FCC Compliance

The FCC requires that you will be advised of certain requirements involving the use of this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Privacy of communications may not be ensured when using this device. Changes or modifications not expressly approved in writing by Amplicom may void the user's authority to operate this equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.

NL 100 Neck Loop



- 1 Neck Loop
- 2 Power ON LED (Green)
- 3 Low Battery LED (Red)
- 4 Volume Control
- 5 Power ON/OFF
- 6 Microphone

Important Safety Instructions

When using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

1. Do not use this product near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool.
2. Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.
3. Use only the batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions. Save these instructions for future use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Intended use

This phone is suitable for use on a public telephone network. Any other use is considered unintended use. Unauthorized modification or reconstruction is not

permitted. **Do not** open the device and attempt any repair work yourself.

Power failure – What to do

Power failure can affect your phone and equipment. Only the corded phone will work if there is a power failure.


Medical equipment

Do not use the phone near emergency or intensive care medical equipment, or during an electrical storm. If you have a pacemaker check with a medical expert before using this product.

Hearing aid compatibility


This phone works with most popular hearing aids. However, given the wide range of hearing aids available, the phone may not function fully with every hearing aid.

Telephones identified with this logo have reduced noise

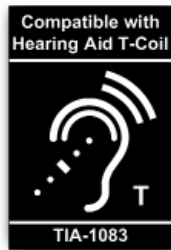

and interference when used with most T-coil equipped hearing aids and cochlear implants. The TIA-1083 Compliant Logo is a trademark of the Telecommunications Industry Association. Used under license.

Disposal

The  symbol on this product indicates that electrical and electronic apparatus and battery pack must be disposed of **separately** from domestic waste at suitable collection points provided by the public waste authorities.

Getting Started — Included Equipment

- 1 Neck Loop NL100
- 1 AAA Battery
- 1 2.5 mm to 3.5 mm Product Adapter

Set up


1. Insert the battery

- i. Insert the AAA battery into the battery compartment on the back of the NL100. Note the + and - markings and position the battery the correct way.
- ii. Close the battery compartment cover.

Important: Do not use rechargeable batteries.

2. Connect the NL100

Connect the NL100 to the headset socket of the PowerTel handset as shown in the diagram and put the neck loop over your head.

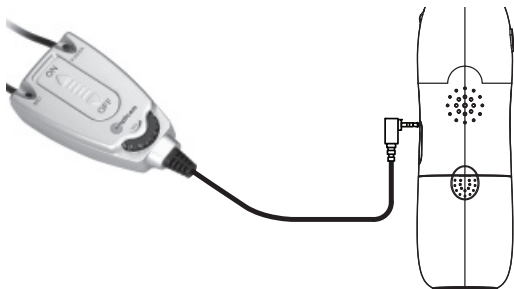

Using the NL100

The NL100 uses an induction loop system which will work together with a hearing aid, when set to the T position, to help the user hear sounds more clearly.

1. Slide the ON/OFF switch to ON. The green power LED will light up.

Important: If the power LED turn red, the battery power is low. The battery should be changed as soon as possible.

2. Switch the hearing aid to T or MT mode.
3. Adjust the volume using the wheel on the NL100.
4. The NL100 is now ready for use and can be used to speak to callers with the built-in microphone.
5. Slide the ON/OFF switch to OFF at the end of the call to save battery power. The power LED will go out.

Important: The adapter cord supplied with the NL100 can be used to connect to compatible MP3 devices or mobile phones. Follow the steps above.

Maintenance and Warranty

Maintenance

- Please clean your equipment's surfaces with a soft, lint-free cloth.
- Never use cleaning agents or solvents.

Warranty

AMPLICOM equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble free functioning and a long service life. The terms of the warranty do not apply where the cause of the equipment malfunction is the fault of the telephone network operator or any interposed private branch extension system. The terms of the warranty do not apply to the rechargeable battery pack or power packs used in the products. The period of warranty is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies resulting from material or production faults which occur during the period of warranty will be eliminated free of charge. Rights to claims under the terms of warranty are annulled following intervention by the purchaser or third parties. Damage caused as a result of improper handling or operation, incorrect positioning or storing, improper connection or installation, Acts of God or other external influence are not covered by the terms of warranty.

In the case of complaints, we reserve the right to repair or replace defect parts or provide a replacement device. Replacement parts or devices become our property.

Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer.

If your equipment shows signs of defect during the period of warranty, please return to the sales outlet in which you purchased the AMPLICOM equipment together with the purchase receipt. All rights to claims under the terms of warranty in accordance with this agreement must be asserted exclusively with regard to your sales outlet.

Two years after the purchase of our products, claims under the terms of warranty can no longer be asserted.



This page left intentionally blank

This page left intentionally blank



**NL
100**

**Guía del
usuario**



Instrucciones de seguridad importantes.....	4
Instalación	6
Uso del NL100.....	7
Mantenimiento y garantía	8

Cumplimiento de las normas de la FCC

La FCC nos obliga a que se le informe de ciertos requisitos relacionados con el uso del equipo. Este equipo cumple con la Sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y, (2) este dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento errático. La privacidad de las comunicaciones no puede garantizarse al usar este dispositivo. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Amplicon por escrito, pueden anular el derecho del usuario para utilizar este equipo.

Nota: Las pruebas realizadas en este equipo permiten afirmar que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. No obstante, es imposible garantizar que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de señales de radio o televisión, las cuales pueden detectarse al apagar y encender el equipo, se le recomienda al usuario tratar de corregir el problema tomando una o más de las siguientes medidas: (1) Reorientar o reubicar la antena receptora. (2) Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. (3) Conectar el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor. (4) Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio y televisión capacitado.

Se deben utilizar cables blindados con esta unidad para asegurar el cumplimiento de los límites de la FCC para equipos de Clase B.

NL 100 Bucle de cuello



- 1 Bucle de cuello
- 2 LED de encendido (Verde)
- 3 LED de batería baja (Rojo)
- 4 Control de volumen
- 5 Encendido/apagado
- 6 Micrófono

Instrucciones de seguridad importantes

Cuando utilice su equipo telefónico, siga siempre las medidas básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendios, choque eléctrico y lesiones personales, entre ellas:

1. No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, tina de baño, lavamanos o el fregadero de la cocina o el lavadero, ni tampoco en sótanos húmedos o cerca de una piscina.
2. No utilice el teléfono para reportar una fuga de gas cerca de dicha fuga.
3. Utilice únicamente las baterías indicadas en este manual. No deseche las baterías quemándolas. Podrían explotar. Consulte las normas locales donde posiblemente encontrará instrucciones especiales para desecharlas. Conserve estas instrucciones para usar en el futuro.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Uso específico

Este teléfono es apto para uso en una red telefónica pública. Otro uso diferente se considera como uso no específico. La reconstrucción o modificación sin autorización está prohibida. **No** abra el dispositivo ni intente repararlo usted mismo.

Interrupción del suministro eléctrico – Qué hacer

Una interrupción del suministro eléctrico puede afectar su teléfono y su equipo. Sólo el teléfono fijo funcionará si hay una interrupción del suministro eléctrico.

Equipo médico

No use el teléfono cerca de ningún equipo médico de emergencia o cuidados intensivos, ni tampoco durante una tormenta eléctrica. Si usa marcapasos, consulte con un médico especialista antes de utilizar este producto.

Compatibilidad con audífonos


Este teléfono funciona con la mayoría de los audífonos conocidos. Sin embargo, dado la amplia gama de audífonos disponibles, el teléfono podría no funcionar en su totalidad con todos los audífonos.

Los teléfonos identificados con este logotipo tienen ruido e interferencia reducida cuando se utilizan con la mayoría de los audífonos con una bobina T incorporada y con implantes cocleares. El logotipo en conformidad con TIA-1083 es una marca registrada de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones. Utilizado bajo licencia.



Desecho



El símbolo  que lleva este producto indica que los aparatos eléctricos y electrónicos deben desecharse **por separado** de los desechos domésticos y en puntos de recolección adecuados provistos por las autoridades de desechos públicos.

Procedimientos iniciales – Equipo incluido

- 1 bucle de cuello NL100
- 1 batería AAA
- 1 adaptador para el producto de 2.5 mm a 3.5 mm

Instalación


1. Inserte la batería

- i. Inserte la batería AAA en el compartimiento de baterías en la parte posterior del NL100. Fijese en la marca + y -, y coloque la batería de forma correcta.
- ii. Cierre la tapa del compartimiento de las baterías.

Importante: No utilice baterías recargables.

2. Conecte el NL100

Conecte el NL100 al tomacorriente del audífono del auricular PowerTel como se muestra en el diagrama y coloque el bucle de cuello por encima de su cabeza.

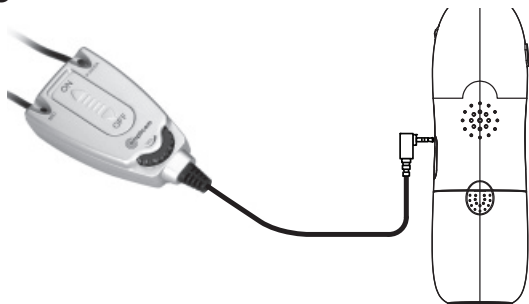



Uso del NL100

El NL100 utiliza un sistema cerrado de inducción que al ubicarlo en la posición T, funcionará junto con el audífono para ayudar a que el usuario oiga los sonidos con mayor claridad.

1. Deslice el interruptor de encendido/apagado a la posición de encendido. Se iluminará el LED verde de encendido.

Importante: Si el LED de potencia se pone rojo, la batería tiene poca carga. Se debe cambiar la batería lo más pronto posible.

2. Cambie el audífono al modo T o MT.
3. Ajuste el volumen utilizando la rueda en el NL100.
4. El NL100 ahora está listo para usar y puede ser utilizado para hablar con personas con el micrófono incorporado.
5. Deslice el interruptor de encendido/apagado a la posición de apagado al

finalizar la llamada para ahorrar carga de la batería. El LED de encendido se apagará.

Mantenimiento y garantía

Mantenimiento

- Limpie la superficie de su equipo con un paño suave y libre de pelusa.
- Nunca use productos de limpieza o solventes.

Garantía

El equipo de AMPLICOM se ha fabricado y probado de acuerdo con los métodos de producción más recientes. El uso de materiales cuidadosamente seleccionados y tecnología de amplio desarrollo aseguran el funcionamiento sin problemas y la duración prolongada del producto. Los términos de la garantía no se aplican si el funcionamiento incorrecto del equipo es causado por el operador de la red telefónica o por cualquier sistema privado de extensión de línea interpuesto. Estos términos tampoco se aplican al paquete de baterías recargables ni a los paquetes de alimentación utilizados con el producto. El período de garantía es de 24 meses a partir de la fecha de compra.

Todos los defectos causados por fallas de fabricación o materiales que ocurran durante el período de garantía serán corregidos sin costo alguno. El derecho a reclamaciones en virtud de esta garantía será anulado tras la intervención del comprador o de terceras partes. Los daños causados por el manejo u operación indebidos, la ubicación o almacenamiento impropios, la conexión o instalación incorrectas, causas de fuerza mayor u otros motivos externos, no están cubiertos por los términos de esta garantía.

En caso de reclamaciones, nos reservamos el derecho de reparar o reemplazar las piezas defectuosas o proporcionar un dispositivo de reemplazo. Las piezas o los dispositivos reemplazados pasan a ser de nuestra propiedad.

Los derechos a una compensación en caso de daños se excluyen donde no haya prueba de negligencia grave sin intencionalidad o intencionada por parte del fabricante.

Si observa indicios de defectos en su equipo durante el período de garantía, devuelva el equipo de AMPLICON al punto de venta donde lo compró junto con el recibo de compra. Todos los derechos a reclamaciones bajo los términos de la garantía en virtud de este acuerdo deben exigirse exclusivamente en el punto de venta.

Una vez transcurridos dos años de la compra del producto, los derechos emanados de esta garantía no tendrán más validez.



**Está página queda intencionalmente
en blanco**

Questions? ¿Dudas?

Amplicom USA Service Center

Centro de servicio de Amplicom en los EE.UU.

3018 Ambrose Avenue

Nashville, TN 37207

V/TTY:

1-866-AMPLICOM (267-5426)

www.amplicomusa.com



Distributed by: Amplicom USA LLC

Distribuido por: Amplicom USA LLC

Made in China

Hecho en China