

SERENE<sup>®</sup>  
innovations  
*Making Life Easier*

# SS-201 Super Bed Shaker

Operating Guide



 **Bluetooth<sup>®</sup>**

Model  
**SS-201**

Thank you for purchasing the **Super Bed Shaker, Model SS-201**. Its free App comes with a built-in alarm clock function. SS-201 provides vibrating notification on alarm clock, text messaging and other social media App's. Please read this operating guide very carefully before use and keep it for future reference. If you have any questions, please contact our Customer Care Department.

**Toll-Free Help Line:** 866.376.9271 (8AM-5PM PST, M-F)

### **Important Safety Instructions:**

In order to reduce the risk of fire, electrical shock or injury to people when using the Super Bed Shaker, Model SS-201, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions carefully before using this product.
2. Do not place unit on a metal surface. Metal surfaces can reduce wireless signal transmission.
3. This product uses rechargeable batteries.
4. To reduce risk of injury, close supervision is necessary when the appliance is used near children.

## **Important Safety Instructions (cont.):**

5. Do not allow the machine to get in contact with moving parts or exposed metal surfaces.
6. Only use attachments recommended / sold by the manufacturer.
7. Do not use product outdoors.
8. Do not use product near water.
9. To disconnect, switch all controls to **“Off”** position, then remove plug from outlet.
10. Do not unplug the unit by pulling the cord – grasp plug, not cord.
11. Unplug unit from outlet when not in use and before servicing or cleaning.
12. Do not operate the product with a damaged cord or plug; do not operate the appliance if malfunctioning occurs or is dropped or damaged in any manner. Return problem unit to the nearest authorized facility for examination; repairs may include but are not limited to electrical and mechanical adjustment.
13. Avoid using this product during electrical storms as the risk of electrical shock is increased.
14. Specifications surrounding this product are subject to change without notice.

## Important Safety Instructions (cont.):

### Disposal of SS-201 used batteries:

Please dispose of the SS-201 batteries properly, following any local regulations. **DO NOT** dispose of the unit/used batteries in the household trash. Take the equipment to a near by recycle center.



### Packaging Contents:


Your **Super Bed Shaker** is packaged with all the items shown. If anything is missing, please contact our Customer Care Department immediately\*.



Super Bed Shaker



Quick Guide

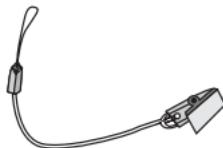


Pillow Clip



USB to Micro USB  
Charging Cable

## Feature Identification:

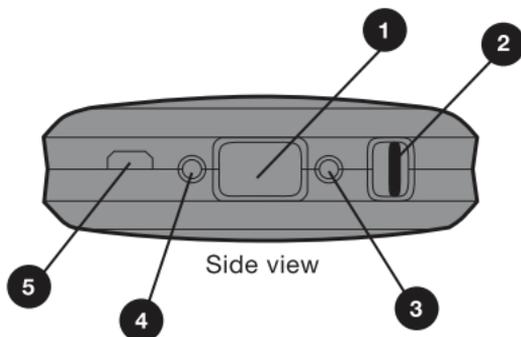

1. **RESET/SNOOZE**
2. Power **ON /OFF**
3. Bluetooth® Indicator
4. Low Battery/ Charge Indicator
5. Charger Port

## Charging:

Plug the USB charging cable to an AC Adapter (not included) and connect the cable to the Super Bed Shaker Model SS-201. Allow battery to charge for approximately 3-4 hours before first use. A fully charged battery can last 10-45 days depending on frequency of use. The shaker should never be connected to the AC power adapter for more than one week.

## Charging (cont.):

### Low Battery / Charge Indicator:

- Low battery status – blinks every 3 seconds
- Charging – blinks every 1 second
- Full charge with AC adapter – solid lit

### Download App:

1. Make sure your smartphone or connecting device is Bluetooth® compatible (4.0 and above).
2. Go to Apple Store® or Google Play Store® and search for the “Super Bed Shaker” App.
3. Download the free App on your iOS or Android® device.



### Pairing Super Bed Shaker to your Smartphone:

1. Turn “**ON**” your smartphone’s Bluetooth® function and open the Super Bed Shaker App.
2. Turn “**ON**” the power to Super Bed Shaker unit.


### Pairing Super Bed Shaker to your Smartphone (cont.):

3. The App will search for the Super Bed Shaker unit.
4. Press “**Pair**” on smartphone when prompted. When successful, the Bluetooth® indicator on the Super Bed Shaker unit will blink once every 6 seconds, and the Super Bed Shaker App banner will turn Green.



### Indications of No Bluetooth Connection:


1. If the Super Bed Shaker Unit is not connected to a Bluetooth® device it will blink once every 3 seconds.

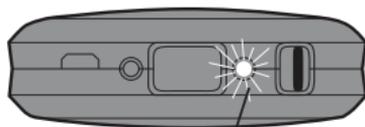

Bluetooth® Indicator

## Indications of No Bluetooth® Connection (cont.):


2. On the Super Bed Shaker App, the settings screen will say “**NOT CONNECTED**” and the RED banner will indicate no Bluetooth® connection has been established between your smartphone and the Super Bed Shaker

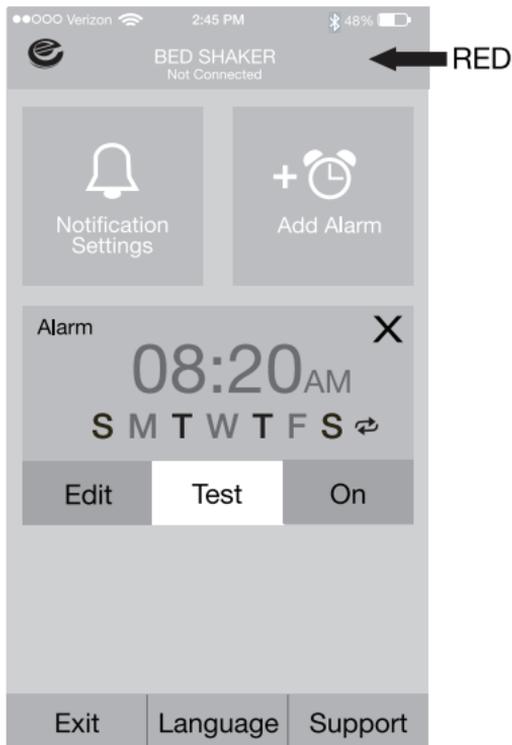

## Indications of No Bluetooth® Connection

(cont.):

3. The test screen will show that the Super Bed Shaker is not connected to the Bluetooth® device.

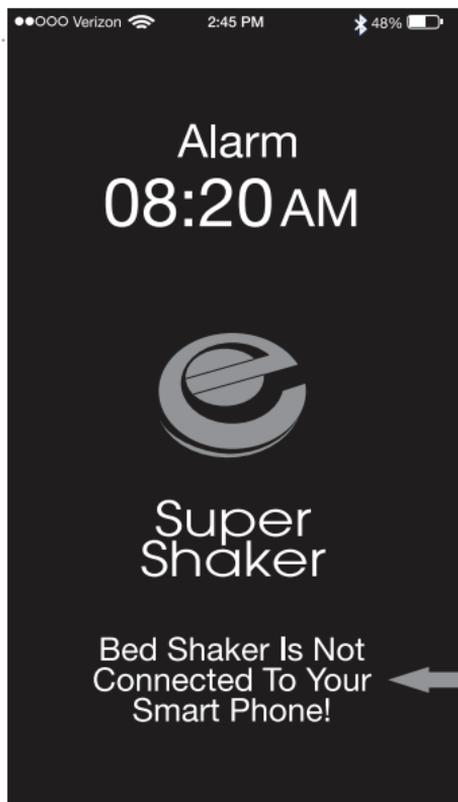


## Indications of No Bluetooth® Connection

(cont.):

4. Repeat Pairing process. Once connected, continue on App to Select Language, Alarm Times, and Notifications for Social Media.

### Language Select:

1. Tap on the screen where it says “**LANGUAGE**”.

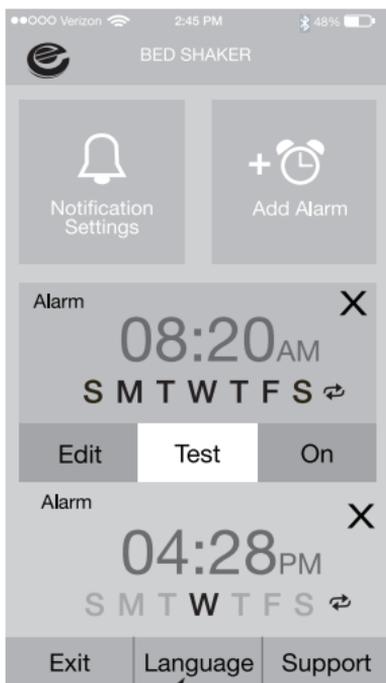


## Language Select (cont.):

2. Tap to select and highlight the language you wish to use.
3. Tap **“SAVE”** to change the language.



## Set Alarm Times:


1. Tap “**ADD ALARM**” icon

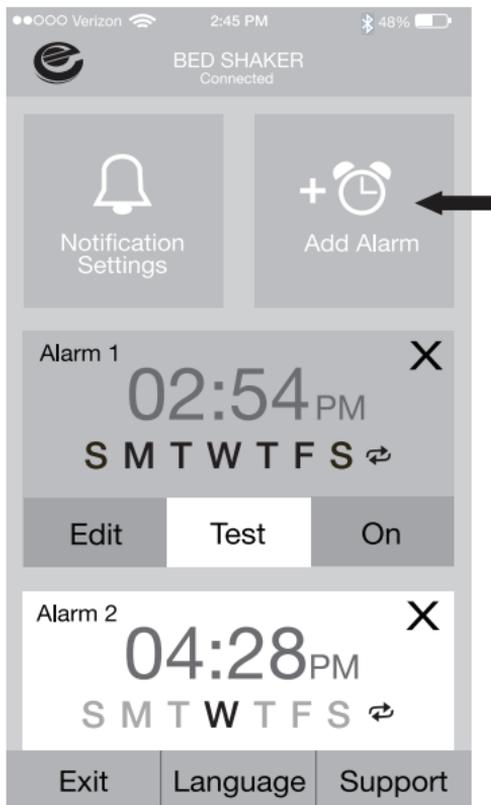

## Set Alarm Times (cont.):


2. Tap Set Alarm then tap **“SAVE”** to finish alarm setting. Display will return to main screen with updates.

**Note:** All alarm settings from the App will be saved in the Super Bed Shaker internal memory as long as its power remains on. Once downloaded, shaker can work without smart phone. Any changes to alarms, however, must be made on the App.

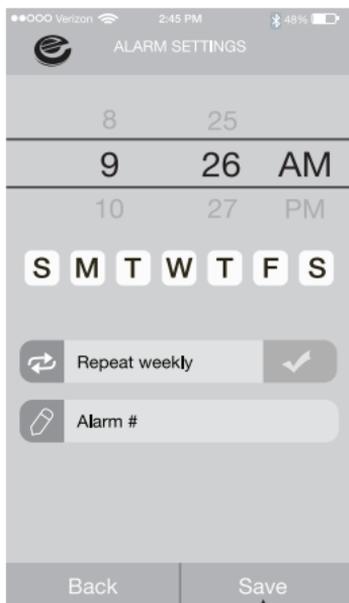

## Select Alert Notifications:

1. Tap “**NOTIFICATION SETTINGS**” to setup the alerts for incoming Calls, Text, SMS, E-mail and Social Media Apps that will set off the Super Bed Shaker.

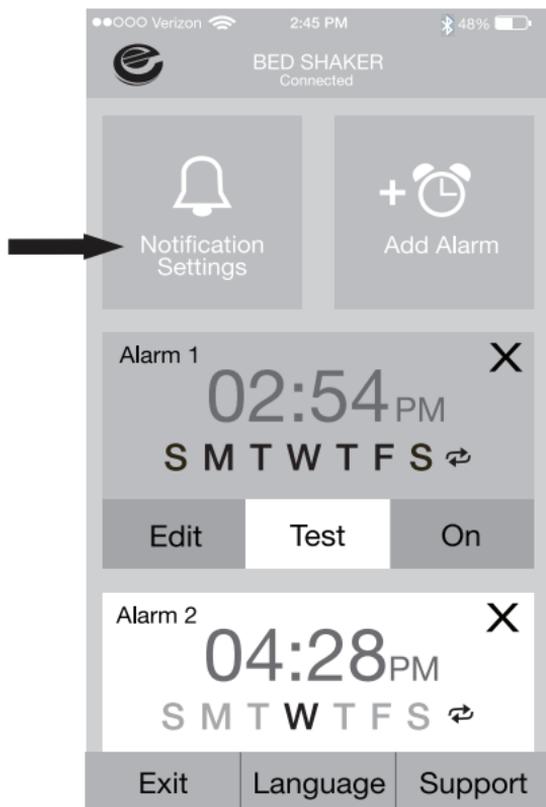

## Select Alert Notifications (cont.):

2. Tap the individual settings/Apps that you want to enable/disable.
3. Tap **“SAVE”** to save your settings.




## Super Bed Shaker Unique Vibrations:

1. For Incoming Calls – it vibrates on incoming calls. Press **“RESET/SNOOZE”** button on Super Bed Shaker or answer the call on your smartphone to end vibration.
2. For Text and Social Media Notifications - it vibrates up to 3 times.
3. For Alarm Clock Alerts – it vibrates for about 85 seconds. **“RESET/SNOOZE”** feature will stop vibration and can be repeated a maximum of 12 times for each alarm.

## Stop Vibration And Activate Snooze:


1. Press the **“RESET/SNOOZE”** button once on the Super Bed Shaker while the alarm is active to initiate a 5-minute snooze period.  
Or,
2. In the App, drag the **“RESET/SNOOZE”** button from left to right as it appears on smartphone to initiate a 5-minute snooze period.

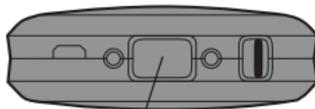

RESET/SNOOZE

## Stop Vibration and Cancel the Alarm:

1. To cancel an alarm/vibration on the Super Bed Shaker, press and hold the “**RESET/SNOOZE**” button on the Super Bed Shaker for 2-seconds.  
Or,
2. In the App, drag the “**OFF**” button from right to left as it appears on the smartphone.

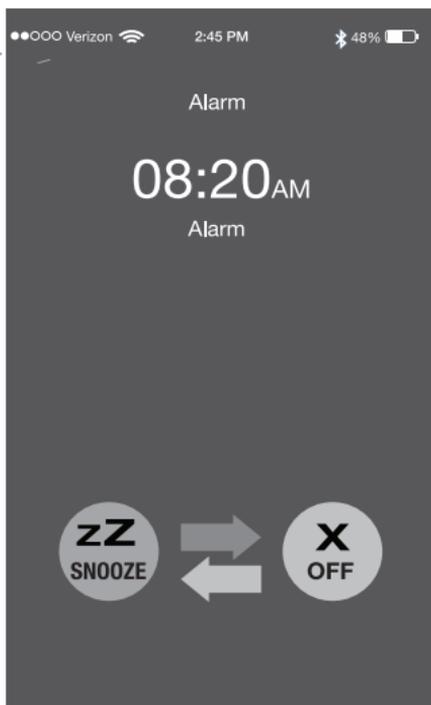

**Note for Apple iPhone® Users:**

1. Once the shaker has been paired with one iPhone, each time the shaker is powered **ON** it will automatically connect to the same iPhone® in range.
2. If the shaker has been paired with multiple iPhones, each time the shaker is powered **ON** it **WILL NOT** automatically reconnect to the last synced iPhone®. Instead, the shaker will seek the Bluetooth® devices in range, and will connect to the first iPhone® that it can find, provided it has already been synced with it. The connection usually takes seconds to form.
3. The shaker can be paired with up to 5 Bluetooth® devices, after which it will start to overwrite the old devices.

**Note for Android® Users:**

1. If the shaker was paired with an Android® device, each time the shaker is powered **ON** it **WILL NOT** automatically connect to the last synced Android® device. This is because Android® phones vary in their models and operating systems.

**Note for Android® Users (cont.):**

2. Different Android® models may selectively close non-active Apps to save battery power. To ensure successful connection, activate the shaker's App before you power **ON** the shaker to reconnect. Please test your Android® devices for automatic reconnections and decide if this extra step of Super Bed Shaker App reactivation is necessary for your device.
3. The shaker can be paired with up to 5 Bluetooth® devices, after which it will start overwrite the old devices.

**Cleaning And Maintenance:**

1. The surface of the device can be cleaned with a soft, dry cloth.
2. Do not use any sprays near the device. Do not use any solvents, chemicals, or cleaning solutions containing alcohol or ammonia or abrasives.
3. Do not allow liquids to spill into any openings on the device.

**Technical Specifications:**

Bluetooth.....	Version 4.0 or later
Syncing.....	iOS 8 and up Android 4.4 or later
Display.....	None
Transmit Power.....	Class 2
Paired Devices.....	Up to 5 (max.)
Effective Range.....	Approx. 10m (33 feet)
Battery Installed.....	3.7V rechargeable
Usage Time.....	Up to 45 days based on usage
Battery Charge Time.....	Approx. 3- 4 hours
Charging cable.....	USB type to micro USB
Charging Voltage.....	5VDC 500mA 5VDC USB AC adapter (not included)
Operating temperature...	10° to 45° C
Dimensions.....	Approx. 78 x 90 x 26mm
Weight.....	Approx. 4.5 oz. (with battery)

Specifications are subject to change without notice

## Warranty / Service Information:

Your **Super Bed Shaker (SS-201)** comes with a one-year limited warranty. For the warranty period we will guarantee any defects involving materials or production relating to the **Super Bed Shaker (SS-201)**. In the event that the **Super Bed Shaker (SS-201)** fails to function properly, and if it is during the one-year warranty period, please return the unit (freight prepaid) with proof of purchase (sales receipt or packing slip, no exceptions) to Serene Innovations.

Serene Innovations will either repair or replace the unit (with a refurbished unit or a unit of equal condition) and return it to you (using UPS/USPS ground shipping) at no cost to you (there will be a nominal additional shipping charge if it is shipped outside of the 48 Continental states).

This warranty does not apply to any product that has been accidentally damaged due to: abuse, misuse, negligence, use on an electrical frequency or voltage other than the one marked on the product and/or described in this manual. Defects or errors caused by unauthorized alterations, repairs and/or tampering are also not covered by this warranty.

Please dispose of used batteries properly, following any local regulations. Do not incinerate.

### **Incidental of Consequential Damages:**

Neither Serene Innovations, Inc. nor the retailer, dealer or selling distributor has the responsibility for any incidental or consequential damages, including, without limitation, commercial loss of profit or for any incidental expenses, loss of time or inconvenience. Some states do not allow exclusion or limitation of incidental or consequential damage, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty does not apply to any product that has been accidentally damaged, abused, misused or neglected, used on electrical frequency or voltage other than marked on product and/or described in the manual. Defects or errors caused by unauthorized alterations, repairs and/or tampering, are also not covered by this warranty. This Warranty grants you specific legal rights and you may also have other legal rights that vary from state to state. If a defect covered by this warranty should occur, promptly contact a Customer Care Representative by phone, or log onto [www.sereneinnovations.com](http://www.sereneinnovations.com) to obtain a Return Merchandise Authorization Number (RMA) and shipping instructions, before shipping the product to Serene Innovations. Any shipment without an RMA number will not be accepted and will be returned to you at your expense.

**Incidental of Consequential Damages (cont.):**

Any authorized returned product must be accompanied by a proof of purchase and a brief explanation of the problem.

For out-of-warranty repair and service, please contact our Customer Care Department for a price quote and instructions.

**FCC And IC Information:**

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television

**FCC And IC Information** (cont.):

reception, which can be determined by turning the equipment off and on, you may try one the following methods to correct the interference:

1. Where it can be done safely, re-orient the receiving television or radio antenna.
2. To the extent possible, relocate the television, radio, or other receiver, with respect to the cordless phone.
3. Connect the cordless phone AC adapter into a different electrical outlet.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Modification: Any modification not expressly approved by the manufacturer of this device could void the user's authority to operate the device.

**This Class B digital device complies with Canadian ICES-003, RSS 201 Issue 8.**

iPod and iPad are trademarks of Apple Inc.

Bluetooth is a trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Android is a product of Google

Google Play and the Google Play Logo are trademarks of Google Inc.

SERENE<sup>®</sup>  
innovations  
*Making Life Easier*

**SS-201**

# **Super Bed Shaker avec application de réveil**

**Guide d'utilisation**



 **Bluetooth<sup>®</sup>**

Model  
**SS-201**

Nous vous remercions d'avoir acheté le Super Bed Shaker, modèle SS-201. Son application gratuite est livrée avec une fonction de réveil intégrée. Le SS-201 fournit une notification vibrante pour le réveil, la messagerie texte et autres application de médias sociaux. Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant de l'utiliser et conservez-le pour référence ultérieure. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre Service à la clientèle.

**Ligne d'assistance sans frais:** 1-866-376-9271  
(8 h à 17 h HNP, L.-V.)

### **Consignes de sécurité importante :**

Afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures lors de l'utilisation du Super Bed Shaker, modèle SS-201, les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris les suivantes :

1. Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
2. Ne placez pas l'appareil sur une surface métallique. Les surfaces métalliques peuvent réduire la transmission du signal sans fil.
3. Ce produit utilise des piles rechargeables.

**Consignes de sécurité importantes** (suite) :

4. réduire les risques de blessures, une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé près d'enfants.
5. Ne laissez pas la machine entrer en contact avec des pièces mobiles.
6. N'utilisez que les accessoires recommandés/ vendus par le fabricant.
7. N'utilisez pas ce produit à l'extérieur.
8. N'utilisez pas ce produit près d'une source d'eau.
9. Pour le débrancher, réglez toutes les commandes à « **arrêt** », puis retirez la fiche de la prise.
10. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Saisissez plutôt la fiche.
11. Débranchez l'appareil de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant d'effectuer l'entretien ou le nettoyage.
12. N'utilisez pas l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagé. Ne faites pas fonctionner l'appareil en cas de dysfonctionnement, ou de chute ou d'endommagement de quelque manière que ce soit. Renvoyez l'unité à l'établissement autorisé le plus près pour examen. Les réparations peuvent inclure, sans s'y limiter, un réglage électrique et mécanique.

## Consignes de sécurité importantes (suite) :

13. Évitez d'utiliser ce produit pendant les tempêtes électriques car le risque de choc électrique augmente.
14. Les spécifications relatives à ce produit peuvent être modifiées sans préavis.


## Élimination des piles usées du SS-201 :

Veillez jeter les piles SS-201 correctement, en respectant les réglementations locales. **NE JETEZ PAS** les piles usagées dans les ordures ménagères. Apportez l'équipement à un centre de recyclage près de chez vous.




## Contenu de l'emballage:

Votre Super Bed Shaker est emballé avec tous les articles montrés. S'il manque quelque chose, contactez immédiatement notre service à la clientèle\*.

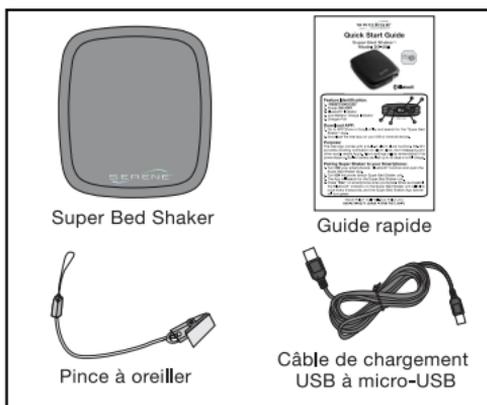

\*Adaptateur secteur USB non compris

## Description de la fonction:

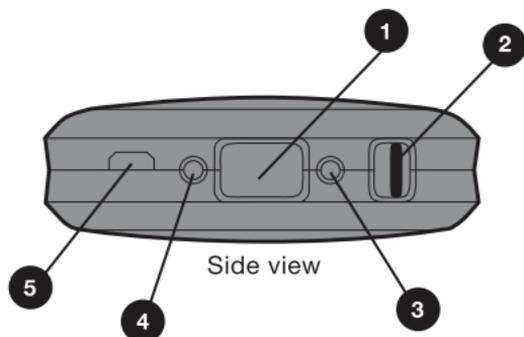

1. **RÉINITIALISER/RÉPÉTER L'ALARME**
2. **Marche/arrêt**
3. Voyant Bluetooth
4. Indicateur de batterie faible/chargement
5. Port de chargeur

### Chargement :

Branchez le câble de charge USB à un adaptateur secteur (non fourni) et branchez le câble au Super Bed Shaker, modèle SS-201. Laissez la batterie se charger pendant environ 3 à 4 heures avant la première utilisation. Une batterie complètement chargée peut durer environ 10 à 45 jours selon la fréquence d'utilisation. Le Shaker ne doit jamais être branché à l'adaptateur secteur pendant plus d'une semaine.

## RÉINITIALISER/RÉPÉTER L'ALARME

## Chargement (suite) :

### Indicateur de batterie faible/charge :

- État de la batterie faible – clignote toutes les 3 secondes
- Charge en cours – clignote toutes les 5 secondes
- Charge complète avec adaptateur secteur – lumière continue

### Téléchargement de l'application:

1. Assurez-vous que votre téléphone intelligent ou votre périphérique de connexion soit compatible avec Bluetooth (4.0 et supérieur).
2. Accédez à l'Apple Store ou à Google Play et recherchez l'application « Super Bed Shaker ».
3. Téléchargez l'application gratuite sur votre appareil iOS ou Android®.




## Appairage entre le Super Bed Shaker et votre téléphone intelligent:

1. **Activez** la fonction Bluetooth de votre téléphone intelligent et ouvrez l'application Super Bed Shaker.
2. Mettez le Super Bed Shaker en marche.
3. L'application cherchera le dispositif Super Bed Shaker.
4. Appuyez sur « Appairage » sur votre téléphone intelligent lorsque vous y êtes invité. Quand l'appairage est réussi, l'indicateur Bluetooth de l'unité Super Bed Shaker clignote une fois toutes les 6 secondes et la bannière de l'application du Shaker devient verte.



## Indications de l'absence de connexion Bluetooth:


1. Si l'unité Super Bed Shaker n'est pas connectée à un périphérique Bluetooth, elle clignotera une fois toutes les 3 secondes.

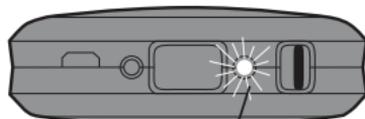

Indicateur Bluetooth


## Indications de l'absence de connexion Bluetooth (suite) :

2. Sur l'application du Shaker Super Bed, l'écran des paramètres indiquera « **AUCUNE CONNEXION** » et la bannière ROUGE indiquera qu'aucune connexion Bluetooth n'a été établie entre votre téléphone intelligent et le Super Bed Shaker.

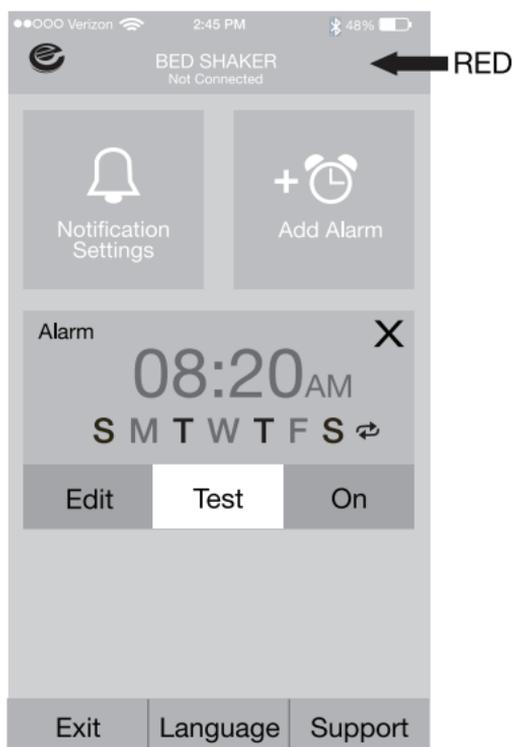

## Indications de l'absence de connexion Bluetooth (suite) :

3. L'écran de test indiquera que le Super Bed Shaker n'est pas connecté à l'appareil Bluetooth.

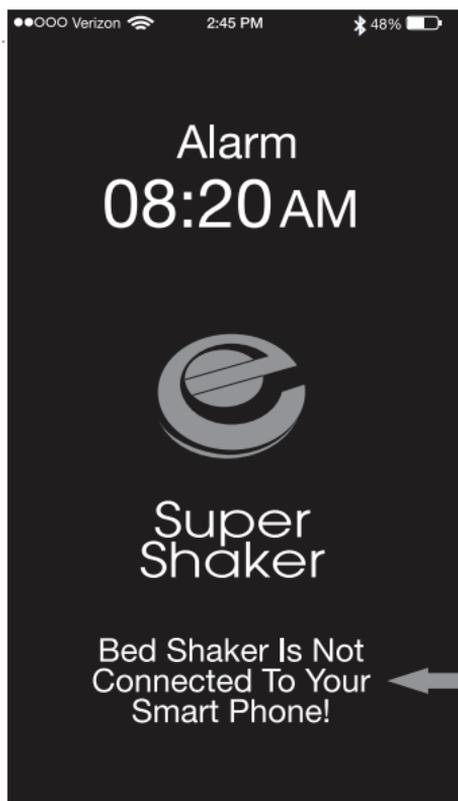


## Indications de l'absence de connexion Bluetooth (suite) :

4. Répétez le processus d'appairage. Une fois connecté, continuez sur l'application pour sélectionner la langue, les heures d'alarme et les notifications pour les réseaux sociaux.


## Sélection de la langue :

1. Tapez sur l'écran où apparaît l'option « **LANGUE** ».

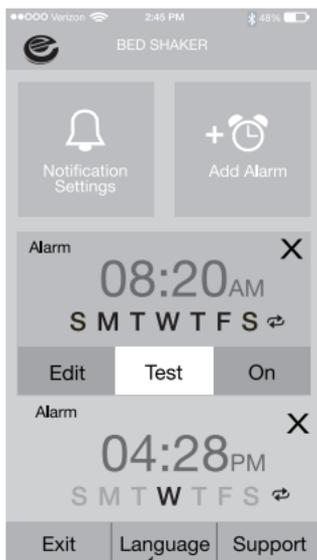


## Sélection de la langue (suite) :

2. Appuyez pour sélectionner et mettre en surbrillance la langue que vous souhaitez utiliser.
3. Tapez sur « **SAUVEGARDER** » pour changer la langue.

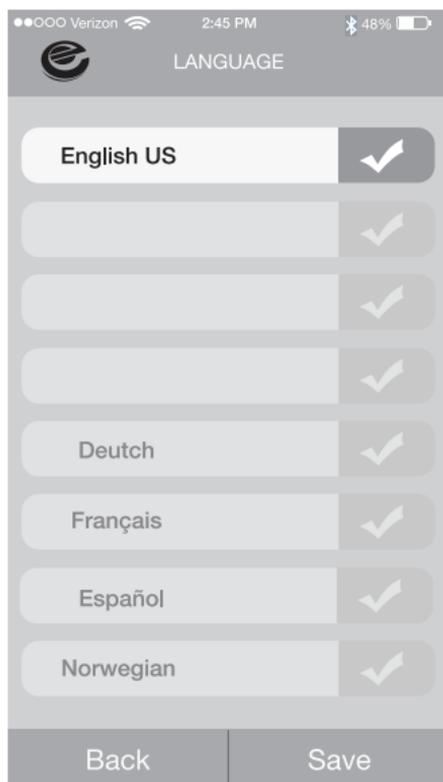

## Réglage des heures de réveil:

1. Tapez sur l'icône « **AJOUTER UN RÉVEIL** »

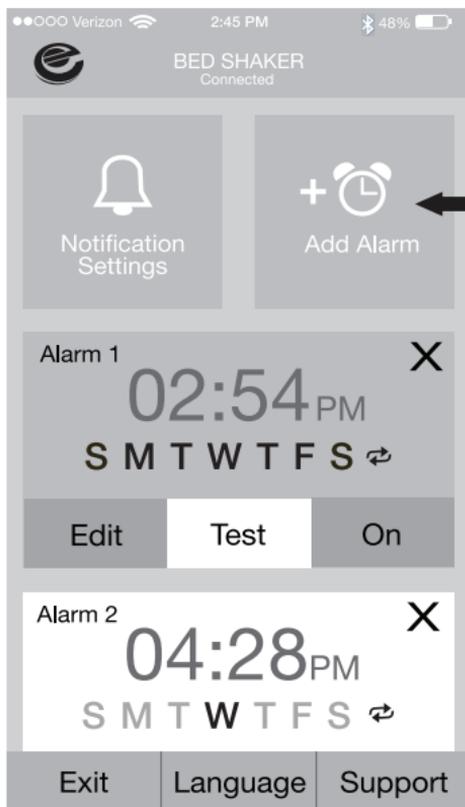

## Réglage des heures de réveil (suite) :


2. Tapez sur « Définir un réveil », puis sur « **SAUVEGARDER** » pour terminer le réglage d'une heure de réveil. Vous retournerez à l'écran principal avec les mises à jour.

**Remarque:** Tous les paramètres de réveil de l'application seront enregistrés dans la mémoire interne du Super Bed Shaker tant que son alimentation restera allumée. Une fois téléchargé, le Shaker peut fonctionner sans téléphone intelligent. Toute modification des réveils doit cependant être effectuée sur l'application.




## Sélection des notifications d'alerte :

1. Appuyez sur « **PARAMÈTRES DE NOTIFICATION** » pour configurer les alertes pour les appels entrants, les SMS, les courriels et les applications de médias sociaux qui déclencheront le Super Bed Shaker.

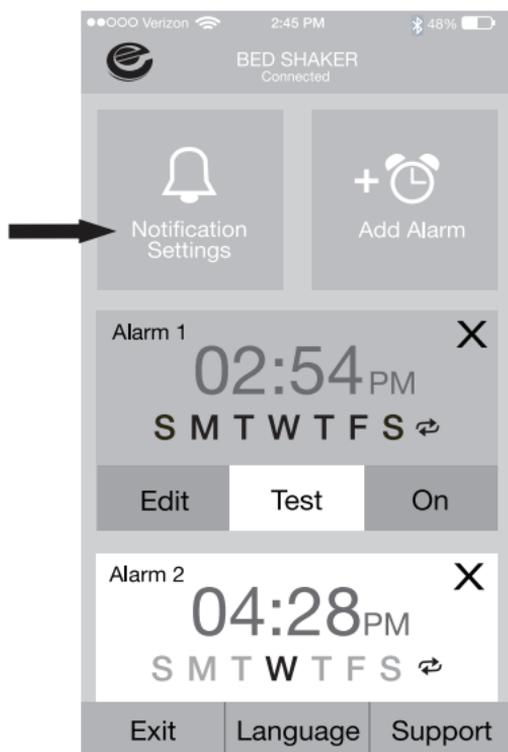

## Sélection des notifications d'alerte (suite) :

2. Appuyez sur les paramètres/applications individuels que vous souhaitez activer/désactiver.
3. Appuyez sur « **SAUVEGARDER** » pour enregistrer vos paramètres.

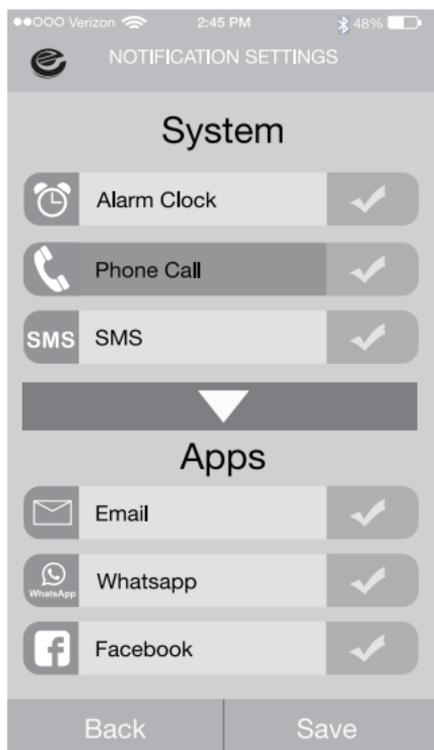


## Vibrations uniques du Super Bed Shaker:

1. Pour les appels entrants – il vibrera à la réception d'appels entrants. Appuyez sur le bouton « **RÉINITIALISATION/RAPPEL DE RÉVEIL** » sur votre Super Bed Shaker ou répondez à l'appel sur votre téléphone intelligent pour mettre fin aux vibrations.
2. Pour les notifications de SMS et de médias sociaux – il vibrera jusqu'à trois fois.
3. Pour les alertes de réveil – il vibrera pendant environ 85 secondes. La fonction « **RÉINITIALISATION/RAPPEL DE RÉVEIL** » fera cesser les vibrations et pourra être répété un maximum de huit fois par réveil.

## Mettre fin à la vibration et activer le rappel de réveil :

1. Appuyez sur le bouton « **RÉINITIALISATION/RAPPEL DE RÉVEIL** » une fois sur le Super Bed Shaker pendant que l'alarme de réveil est active pour déclencher une période de repos supplémentaire de 5 minutes.  
Or,
2. Dans l'application, faites glisser le bouton « **RÉINITIALISATION/RAPPEL DE RÉVEIL** » de gauche à droite lorsqu'il apparaît sur votre téléphone intelligent pour démarrer une période de repos supplémentaire de 5 minutes.

## Mettre fin à la vibration et activer le rappel de réveil (suite) :

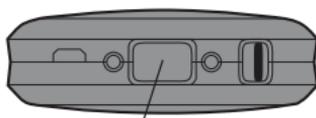


RÉINITIALISER/RÉPÉTER L'ALARME

## Mettre fin à la vibration et annuler l'alarme:

1. Pour annuler une alarme/les vibrations du Super Bed Shaker, appuyez et maintenez enfoncée le bouton « **RÉINITIALISATION/RAPPEL DE RÉVEIL** » du Super Bed Shaker pendant au moins 2 secondes ou plus.  
Ou,
2. Dans l'application, faites glisser le bouton « **RÉINITIALISATION/RAPPEL DE RÉVEIL** » de gauche à droite lorsqu'il apparaît sur votre téléphone intelligent.

**Voir illustration page suivante.**

## Mettre fin à la vibration et annuler l'alarme (suite) :

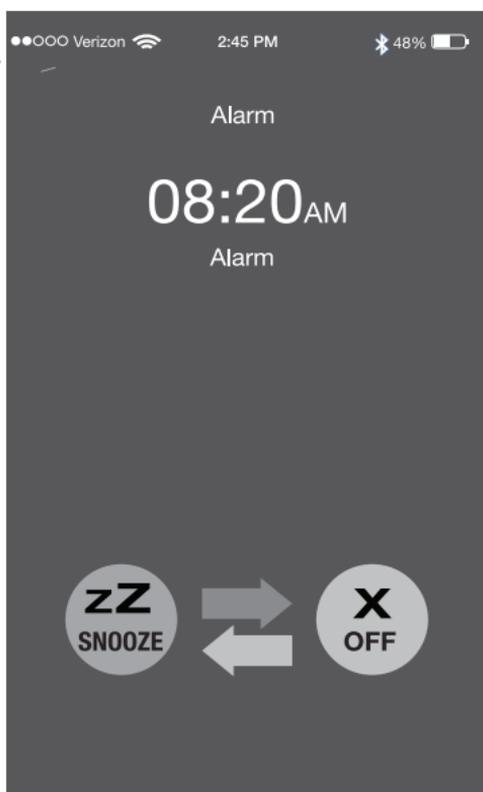

## **Remarque pour les utilisateurs de l'iPhone d'Apple:**

1. Une fois que le Shaker a été apparié avec un iPhone, chaque fois que le Shaker est sous tension, il se connectera automatiquement au même iPhone à portée.
2. Si le Shaker est apparié avec plusieurs iPhone, chaque fois que le Shaker est sous tension, il ne se reconnectera pas automatiquement au dernier iPhone synchronisé. Au lieu de cela, le Shaker recherchera les périphériques Bluetooth à portée et se connectera au premier iPhone qu'il trouvera, à condition qu'il ait déjà été synchronisé avec lui. La connexion prend habituellement quelques secondes pour se former.
3. Le Shaker peut être apparié avec jusqu'à cinq périphériques Bluetooth, après quoi il commencera à écraser effacer les anciens appareils.

## **Remarque pour les utilisateurs d'Android:**

1. Si le Shaker a été apparié à un appareil Android, chaque fois que le Shaker est sous tension, il ne se connectera pas automatique-

## **Remarque pour les utilisateurs d'Android** (suite):

ment au dernier appareil Android synchronisé. C'est parce que les téléphones Android varient dans leurs modèles et systèmes d'exploitation.

2. Différents modèles Android peuvent sélectivement fermer les applications non actives pour économiser l'énergie de la batterie. Pour assurer une connexion réussie, activez l'application du Shaker avant de le mettre sous tension pour vous reconnecter. Testez les connexions automatiques de vos appareils Android et décidez si cette étape supplémentaire de réactivation sur l'application du Super Bed Shaker est nécessaire pour votre appareil.
3. Le Shaker peut être apparié avec jusqu'à cinq appareils Bluetooth, après quoi il commencera à écraser effacer les anciens appareils.

### **Nettoyage et entretien :**

1. La surface de l'appareil peut être nettoyée avec un chiffon doux sec.
2. N'utilisez pas de pulvérisateurs près de l'appareil. N'utilisez pas de solvants, de

**Nettoyage et entretien** (suite) :

produits chimiques ou de solutions nettoyantes contenant de l'alcool ou de l'ammoniac, ou des abrasifs.

3. Ne laissez pas de liquides s'écouler dans les ouvertures de l'appareil.

**Spécifications techniques :**

Version Bluetooth.....4.0 ou ultérieure  
Synchronisation.....iOS 8 ou version ultérieure  
Android 4.4 ou version ultérieure

Puissance de transmission....Classe 2

Périphériques couplés.....5 (max.)

Portée effective..... Environ 10 m (33 pi)

Batterie installée.....3.7 V rechargeable

Temps d'utilisation de la batterie..... Environ 10-45 jours (dépend de l'usage)

Temps de charge de la batterie..... Environ 3-4 heures

Température de fonctionnement.....10 à 45 °C

Dimensions.....78 x 90 x 26 mm

Poids.....4.5 oz

(batterie comprise)

Adaptateur secteur USB 5VDC (non fourni)

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

## Informations sur la garantie/de service :

Votre **Super Bed Shaker (SS-201)** est livré avec une garantie limitée d'un an. Pendant la période de garantie, nous garantissons tout défaut concernant les matériaux ou la production liés au **Super Bed Shaker (SS-201)**. Dans le cas où le **Super Bed Shaker (SS-201)** ne fonctionnerait pas correctement, si cela se produit pendant la période de garantie d'un an, veuillez retourner l'appareil (fret prépayé) avec preuve d'achat (reçu de vente ou bordereau d'emballage, sans exception) à Serene Innovations.

Serene Innovations réparera ou remplacera l'appareil (par une unité remise à neuf ou une unité de condition égale) et vous le retournera (en utilisant un service de livraison de surface de UPS/USPS) sans frais pour vous (il y aura des frais d'expédition supplémentaires nominale si le produit est expédié en dehors des 48 états continentaux).

Cette garantie ne s'applique pas dans le cas de tout produit accidentellement endommagé pour l'une des raisons suivantes: abus, mauvaise utilisation, négligence, utilisation sur une fréquence électrique ou une tension autre que celle marquée sur le produit ou décrite dans ce guide. Les défauts ou les erreurs causés par des modifications, des réparations

## **Informations sur la garantie/de service**

(suite) :

ou des manipulations non autorisées ne sont pas couverts par cette garantie.

Veuillez jeter les piles usées correctement, en respectant les réglementations locales. Ne les incinérez pas.

### **Domages accidentels ou consécutifs:**

Ni Serene Innovations. Inc., ni le détaillant, revendeur ou distributeur ne sont responsables de quelconque dommage accidentel ou consécutif, y compris, sans s'y limiter, de toute perte commerciale ou de profit, ou de quelconque frais accessoire, perte de temps ou gêne. Certains États n'autorisent pas les exclusions ou limitations des dommages accidentels ou consécutifs, donc la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas vous concerner.

Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient d'un État à l'autre.

Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été accidentellement endommagés à cause d'un mauvais usage, d'un usage abusif

**Dommmages accidentels ou consécutifs (suite) :**

ou négligent, ou parce qu'ils ont été alimentés avec un voltage électrique ou une fréquence autres que ce qui est indiqué sur le produit et dans le manuel d'instructions. Les défauts et les erreurs causés par des modifications, des réparations ou le trafiquage non autorisé ne sont pas couverts pas cette garantie. Cette garantie vous confère des droits spécifiques. Certains droits peuvent s'ajouter selon les États. En cas de défaut couvert par cette garantie, vous devez immédiatement communiquer avec un représentant au service à la clientèle par téléphone ou en vous rendant au HYPERLINK "<http://www.sereneinnovations.com/>" "[www.sereneinnovations.com](http://www.sereneinnovations.com) pour obtenir un code Return Merchandise Authorization (RMA) et pour obtenir des instruction d'expédition avant de nous renvoyer le produit. Tout colis sans RMA sera refusé et vous sera renvoyé à vos frais. Tout renvoi autorisé de produit doit être accompagné de la preuve d'achat et d'une brève description du problème. Pour le service et les réparations d'après garantie, communiquez avec le service à la clientèle pour des instructions.

## **Renseignements FCC pour les clients des états-unis uniquement :**

### **Partie 15 des renseignements des règlements FCC**

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règlements de fonctionnement de la FCC sous réserve des deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un dispositif.

numérique de classe B, en vertu de la Partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans les installations résidentielles.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles avec les communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation en particulier.

## Renseignements FCC pour les clients des états-unis uniquement (suite):

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminée en éteignant et allumant l'appareil, vous pouvez essayer les méthodes suivantes afin de corriger ces interférences:

1. Lorsque cela peut être fait en toute sécurité, réorienter l'antenne réceptrice de la télévision ou de la radio.
2. Dans la mesure du possible, déplacez la télévision, la radio ou tout autre récepteur, par rapport au téléphone sans fil.
3. Branchez l'adaptateur AC du téléphone sans fil dans une autre prise de courant.
4. Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

**Modification:** Toute modification non expressément approuvée par le fabricant de cet appareil pourrait faire perdre à l'utilisateur son droit à utiliser cet appareil.

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada, RSS 201 8e édition. 8.

iPod® and iPad® are trademarks of Apple Inc.

Bluetooth® is a trademark of Bluetooth® SIG, Inc.

Android is a product of Google

Google Play and the Google Play Logo are trademarks of Google Inc.



Serene Innovations, Inc.

14731 Carmenita Road, Norwalk, CA90650 Toll Free: 866.376.9271

Local 562.407.5400 [www.sereneinnovations.com](http://www.sereneinnovations.com)

Copyright © 2017 Serene Innovations, Inc. All rights reserved.

△04-05-17

